

# DALLMER CLOG



## **Der „Klassiker“ der anschnallbaren Hufschuhe.**

**Für barfußgehende Pferde.**

**Zum Reiten und zum Fahren.**

**Leicht. Verlässlich. Stabil.**





# DALLMER CLOG DBP u. Ausl.-Pat.

Der DALLMER Clog besteht aus einem elastischen, widerstandsfähigen Kunststoff, welches dem natürlichen Horn an Festigkeit fast gleich kommt. Die schlagdämpfende Eigenschaft des hochwertigen Materials wirkt sich vorteilhaft auf Sehnen und Gelenke aus.

Der Einsatz der DALLMER Clogs setzt eine regelmäßige Hufform und Hufstellung voraus (Zehenwandwinkel ca. 48° - 52° vorn; 55° - 59° hinten). Weitere Grundvoraussetzungen sind: Planes Fußes ohne Drehen, ausreichend Trachten und eine regelmäßige Stellung.



<< Mit dem mitgelieferten Steg wird die Hufbreite einmalig eingestellt.

Die dreifach verstellbaren Gurte sorgen für optimalen Halt >>



Der Clog eignet sich zum Reiten und Fahren barfußgehender Pferde in gemäßigten Gangarten auf festem Untergrund. Auf Weiden und im Matsch sind Clogs nicht geeignet. Die Laufleistung kann unter Berücksichtigung des Untergrundes sowie des Eigengewichts und der Art des Fußes des Pferdes durchaus 600 - 1000 km erreichen.




**Auf Wunsch steht folgendes Zubehör zur Verfügung:**

<< Ballenschoner bei Verletzungen, Mauke etc.

Spikes mit Widia (und/oder Einlegesohle) für den Wintereinsatz >>



Es stehen 4 verschiedene Größen für die Vorderhand (rund) und 3 verschiedene Größen für die Hinterhand (oval) zur Verfügung. Hierzu wird der Huf an der breitesten Stelle gemessen:

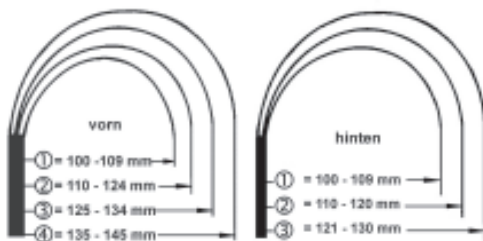

Artikel	Größe	Hufbreite
DALLMER Clog	1	100 – 109 mm Vorderhand
DALLMER Clog	2V	110 – 124 mm Vorderhand
DALLMER Clog	2H	100 – 109 mm Hinterhand
DALLMER Clog	3V	125 – 134 mm Vorderhand
DALLMER Clog	3H	110 – 120 mm Hinterhand
DALLMER Clog	4V	135 – 145 mm Vorderhand
DALLMER Clog	4H	121 – 130 mm Hinterhand
Einlegesohlen gegen Schneestellung		
12 Stück Spikes mit Widia (Gleitschutz)		
Ballenschoner		

**Auch aus dem Hause DALLMER:**



DALLMER Fohlenschuhe



DALLMER Cuff



DALLMER Hufeisenformer

Damit es immer weitergeht ...

**DALLMER**

**CLOG**



DALLMER GmbH + Co. KG · Abt. Hufschuhe · Alte Landstrasse 3 · D-21376 Salzhausen-Putensen  
Tel. 04172 5100 · Fax 04172 7294 · [www.dallmer.de](http://www.dallmer.de) · [hufschuh@dallmer.de](mailto:hufschuh@dallmer.de)

Auch aus dem Hause  
DALLMER:



DALLMER Fohlenschuhe



DALLMER Cuff



DALLMER Hufeisenformer




Damit es immer weitergeht ...

**DALLMER CLOG** DBP u. Ausl.-Pat.

Für alle unvorhergesehenen Hufprobleme auf Distanzritten, während des Turniers und nicht zuletzt ein Bandagensersatz beim Pferdetransport. Von großem Vorteil ist der elastische Kunststoff, der es erlaubt, mit vier Größen die Hufformen aller Pferderassen zu versorgen.

Die Verwendung der Schuhe setzt eine normale Hufstellung voraus (Zehenwandwinkel 48° - 55°).

Durch die Schnallung steht der Huf unter Spannung. Daher muss der Clog nach der Arbeit sobald als möglich gelöst werden. Für Weidegang etc. sind die Clogs nicht geeignet.

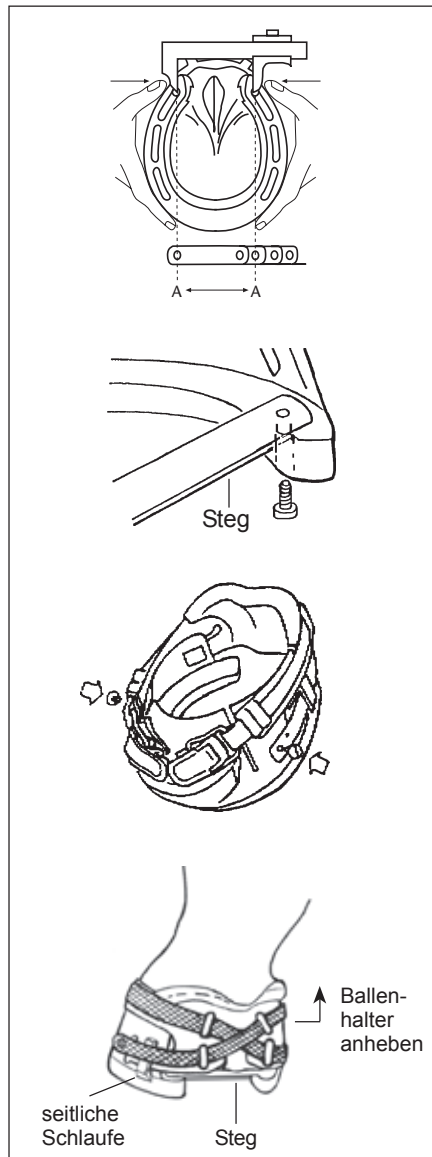

## Befestigungsanleitung der Clogs

Der DALLMER Clog besteht aus einem Kunststoffschuh mit Gurten, Ballenhalter und einem Steg mit Schrauben zur Fixierung der Clogschenkel entsprechend der Hufbreite A – A

Bei entsprechender Ermittlung A – A finden Sie in den mitgelieferten Kunststoffstegen das passende Loch. Rest rund abschneiden.

Der Steg muss verschraubt werden, wie die Zeichnung zeigt.

Damit der Clog satt am Huf anliegt, muss der Hufrand – besonders im Zehenbereich – gut angerundet werden.

Den geöffneten Schnallenschuh so weit auf den Huf schieben, bis die Hufzehe in der Schuhspitze anliegt. Die Länge beider Gurte so einstellen, dass der gepolsterte Ballenhalter die Ballen zentral umschließt. Den Ballenhalter reichlich anheben, die Drahtschlaufen einhängen und dann die Schnallen schließen.

Wenn der Schuhrand am Kronenrand scheuert, muss die Schuhwand gekürzt werden.

Bei sehr flacher Sohle kann das Durchziehen der Spanngurte durch die seitlichen Schlaufen den Halt verbessern.

### Wichtig:

**Nach wenigen Minuten und einigen Schritten den Clog auf richtigen Sitz prüfen. Sollte der Ballenhalter nach unten abgerutscht sein, muss er angehoben und nachgespannt werden.**

### Größen-Skala

Größe	Hufweite in mm	
	Vorderhand	Hinterhand
1	100 - 109	-
2	110 - 124	100 - 109
3	125 - 134	110 - 120
4	135 - 145	121 - 130

Als **Sonderzubehör** sind lieferbar:

- **Ballenschoner** zum Schutz der Fesselbeuge
- Für den Wintereinsatz sind **Einlagen** gegen Schneestellung und **Spikes** lieferbar. Für diese Spikes sind Bohrungen in der Schuhsohle vorbereitet. Vor dem Eindrücken der Spikes den Clog erwärmen.

**Benutzte Schuhe können nicht zurückgenommen werden!**